

AIRTECH

BIOSAFETY 生物安全 CAPSULE 膠囊

負壓擔架 · 用於傳染病患者轉運

BS-Cap-III

1 採用高性能ULPA濾網

採用鐵氟龍(PTFE)材質
濾材，可捕集 $\geq 0.1 \sim 0.2 \mu\text{m}$
懸浮微粒效率達99.9999%。

4 多功能充電配置

支援車用12V電源供電
或使用乾電池。
(可操作約1.5小時。)

2 輕量化設計

選用極輕PVC材質，易
於組裝。

5 適用各類擔架

固定於救護車的擔架上。
(右圖擔架是Fano製造的4080型。)

3 可燃材質選用

濾網及PVC簾採用可燃
材質，使用後，可直接
焚化處理，防止病毒蔓
延。



PTFE濾網

運用抽風方式，將內部維持負壓
狀態。使用後的濾網，可直接焚
化，防止病毒傳播。



魔鬼氈束帶

軟簾四角處及中間兩側皆設有
魔鬼氈束帶，將軟簾有效固定
於擔架上。



拉鍊式設計


依照醫護人員需求設計多方向拉
鍊開口，在完善隔離狀態下，進
行診察。



網綁口

兩側配有可搭配網綁帶使用的
孔隙，可將網綁帶穿入使用。

產品圖面

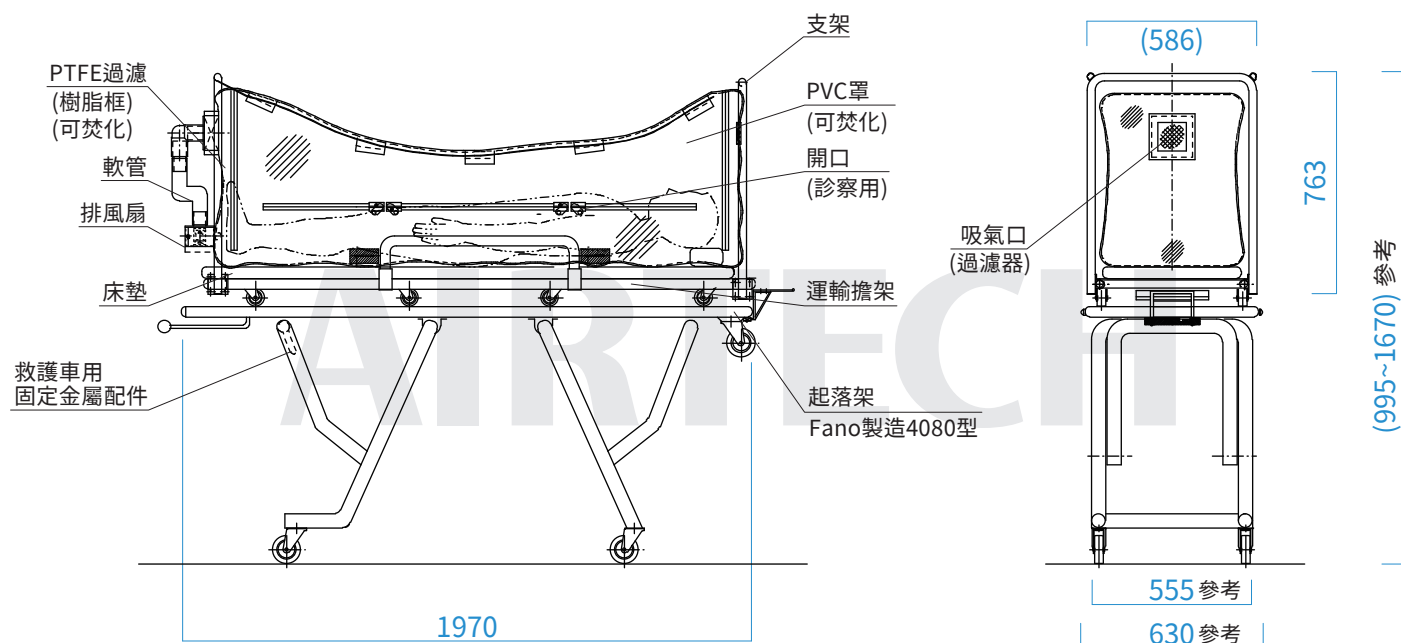

產品規格

型 號	BS-Cap-III
集 塵 效 率	≥99.9999% at 0.1~0.2μm
集 塵 要 素	PTFE ULPA濾網
風 量(CMM)	約0.5
運 轉	使用乾電池或外部車用電源(DC12V)進行操作
電 源	鹼性乾電池×8
	DC12V車用電源
	AC 110V 1Φ 60Hz (選配)
重 量	約50kg(負壓通風罩：約15kg)
外型尺寸(W×D×H)(mm)	1970×630×(995~1670)
構 造	排氣單元：鋼板烤漆
	過濾器：PTFE ULPA(樹脂製框架)
	透明罩：PVC材質