

DESKTOP FUME HOOD

桌上型排煙櫃




化學濾網更換容易

更換方式簡便，無需使用工具即可更換，可依實驗室需求，選配或客製化學濾網。



操作面板指示燈

智慧監控指示燈，提供風機異常及化學濾網、HEPA高效濾網更換提示。

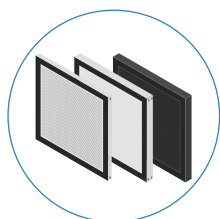


三道過濾系統

- 1 尼龍濾網：阻絕大型灰塵顆粒。
- 2 HEPA高效濾網：第二道去除細微粉塵，大幅提升化學濾網壽命。
- 3 化學濾網：依照選配濾網吸附化學汙染物。




耐化學性操作台

操作台配置實驗室專用Trespa材質樹脂頂板，具有優異的耐化學性。

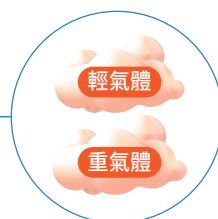

獨特氣流方式

輕氣體由頂部吸入，重氣體由底部吸入，兩處皆有排氣口，可迅速從工作檯中排出。


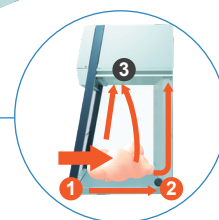


換氣效率大幅提升

於①前側工作檯及②工作檯後側增加排氣口，減少底部氣流停滯，工作區域換氣最大效率高達50%以上。

*舊型號僅③上方排氣口


化學實驗室專用 · 易於安裝 · 無需配管工程降低施工成本

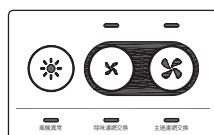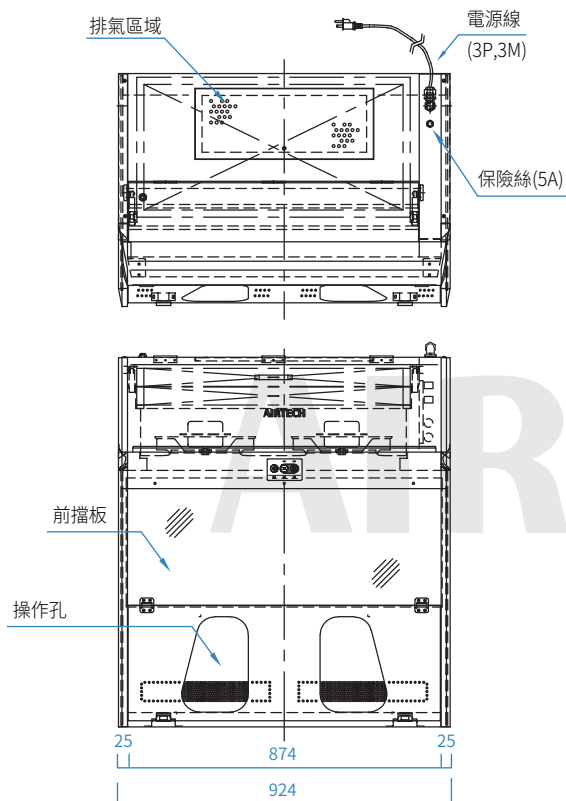

控制面板

化學濾網(擇一安裝)	
等級 A	有機溶劑 臭氧 有機酸 二氧化氮
等級 B	鹼性氣體(氨NH ₃ /胺NH ₂)
等級 C	硫化氫 醋酸 有機酸 硫酸

• 可依使用需求客製化學濾網

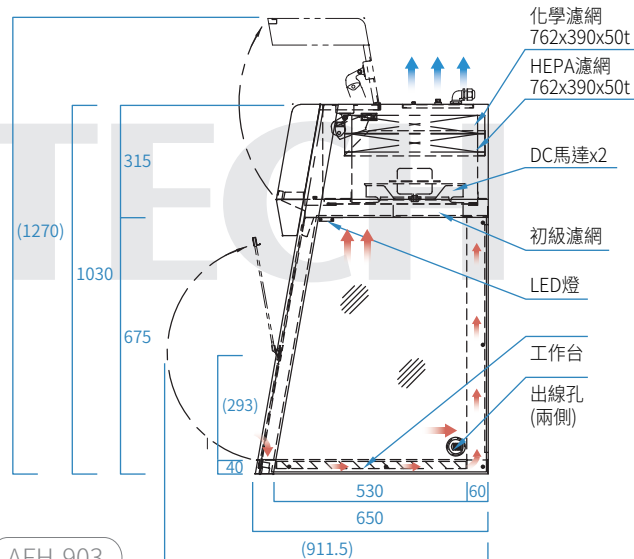

AFH-903

產品規格

型號

AFH-903

集塵效率

HEPA：有效捕捉99.99%最小尺寸達 ≥ 0.3 微米的懸浮微粒

主要濾網

HEPA：762x390x50t x 1pc

次要濾網

尼龍濾網

吸附要素

化學濾網：762x390x50t x 1pc

風速(m/s)

0.6 (操作孔處測量)

風量(CMM)

3.1

結構

主體：冷軋鋼板烤漆

前擋板：聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA (透明)

側擋板：聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA (透明)

工作台：Trespa頂板

側支柱：鋁擠型

電源

AC 110V 1 Φ 50/60Hz

消費電力

一般模式：60W

全速模式：75W

重量(kg)

90

• 型錄中的規格如有更改，恕不另行通知

